



OOley Care Inc. Limited

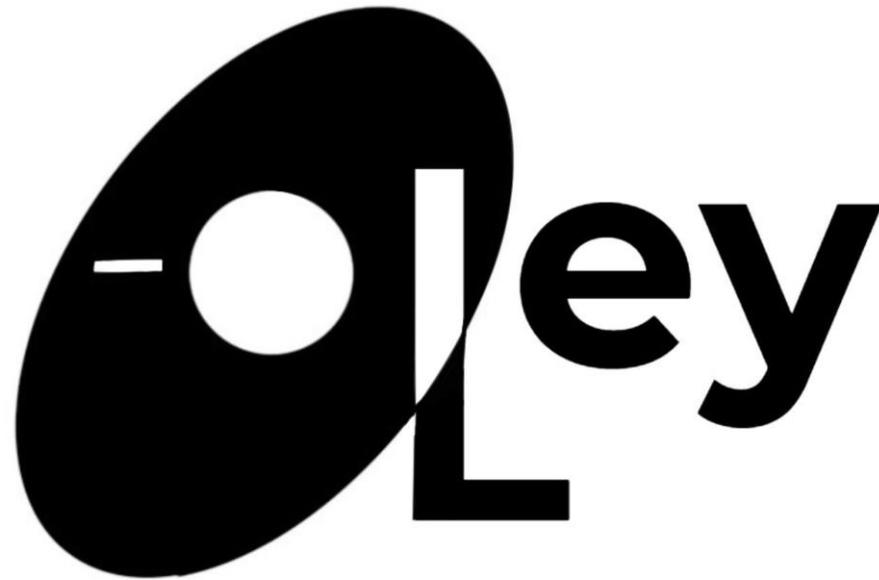

User Manual

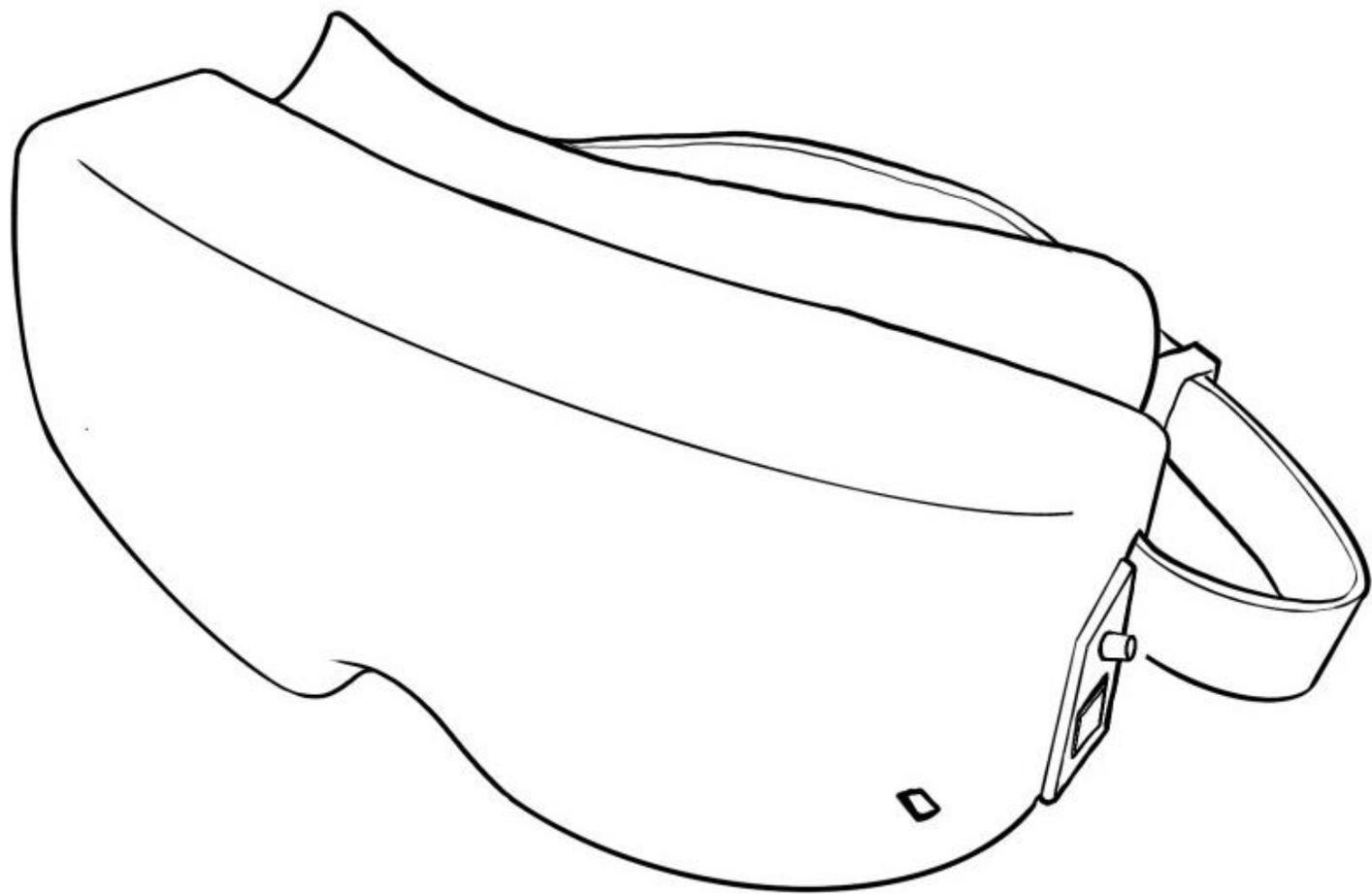

Product Overview

O-Oley


If I care more, eyes stress less

Created by the Hong Kong James Dyson Award National winners comes O-Oley, a wearable, ocular biomedical device that stops the progression of glaucoma. Using personalised thermal and pressure profiles, O-Oley aims to keep the eyes healthy by reducing ocular stress and improving ocular compliance. Enjoy the therapeutic effects to relax, relieve eye strain and improve quality of sleep while ensuring the long-term effects of healthier eyes.


Package Contents

- A O-Oley goggle
- B USB-C cable
- C User Manual


A

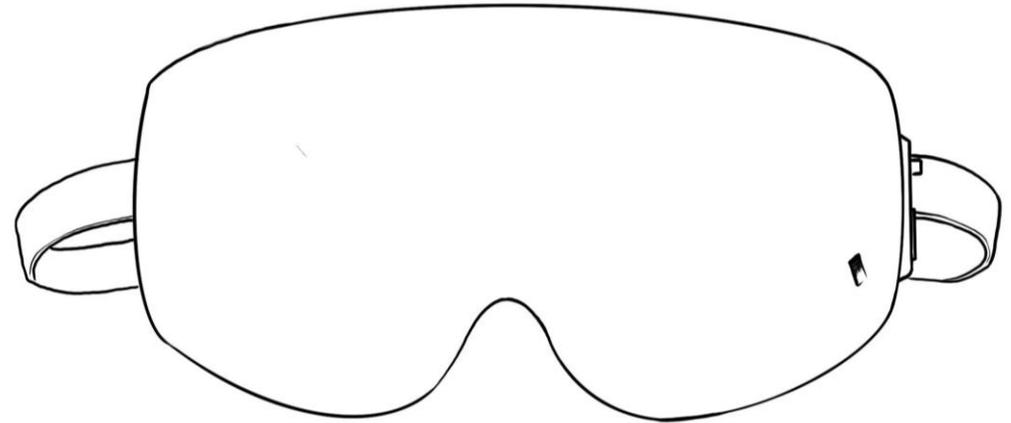

B

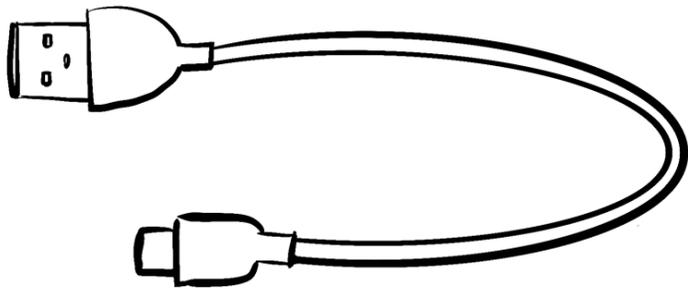

C

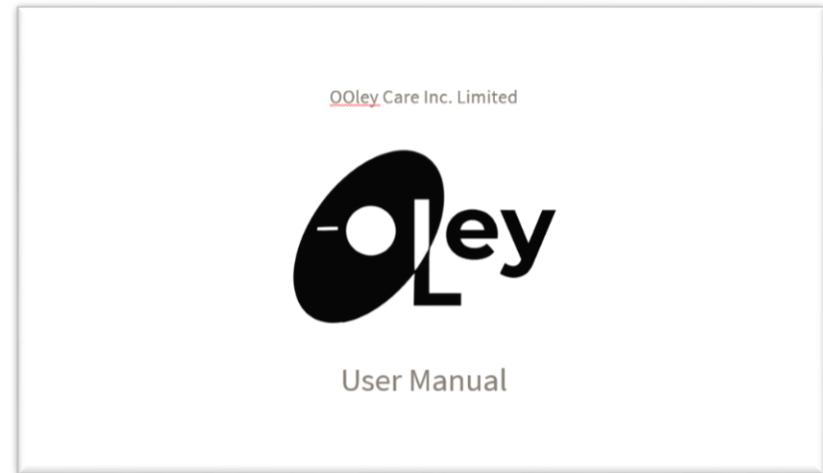

User Interface



Power Button


Press the power button once until a blue light indicator appears to power on.



Relaxation Mode Button

Press the relaxation mode button once to power on and off the therapeutic effects.


To power off, press the relaxation mode button once and the power button twice.

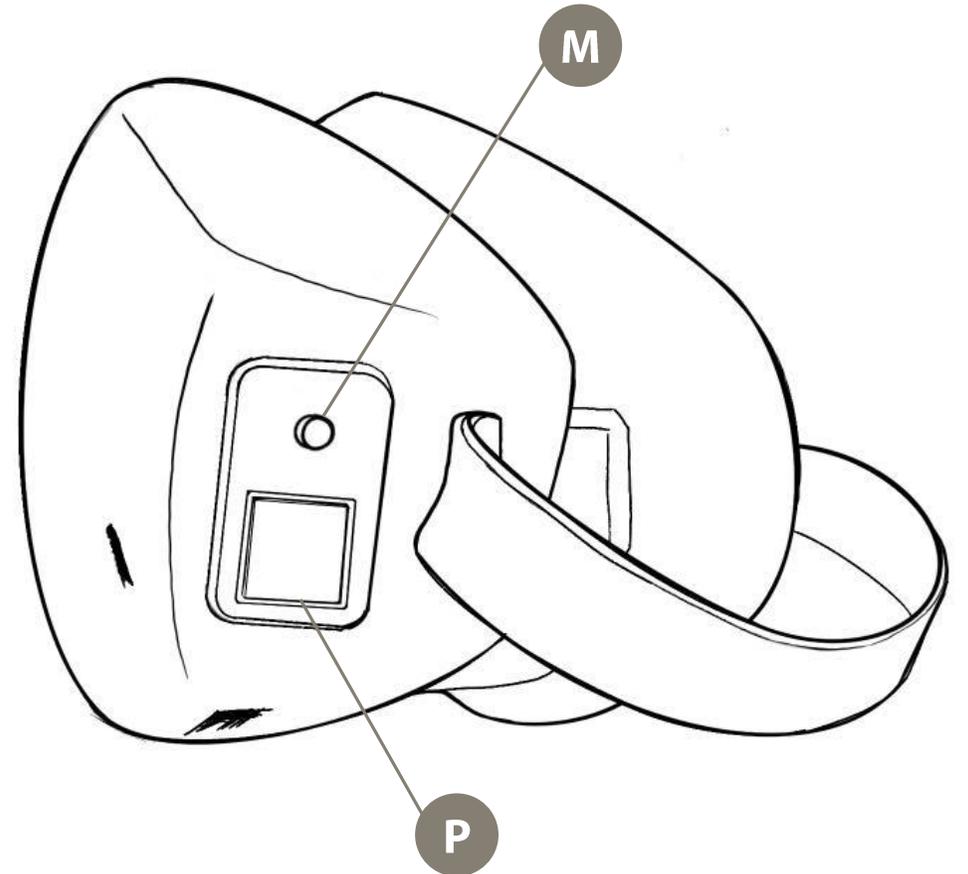


User Interface

Red Light

After turning on the relaxation mode, the red light will appear to indicate the goggle charging up to start the therapeutic treatment.

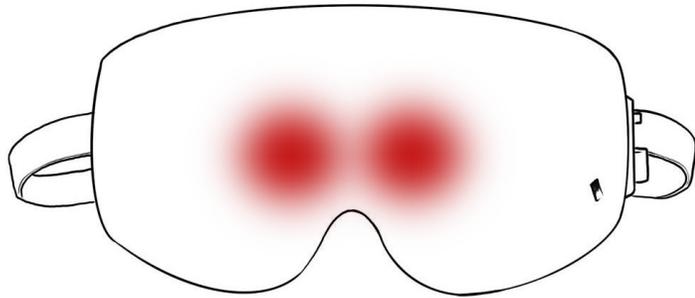


Cyclic Therapy


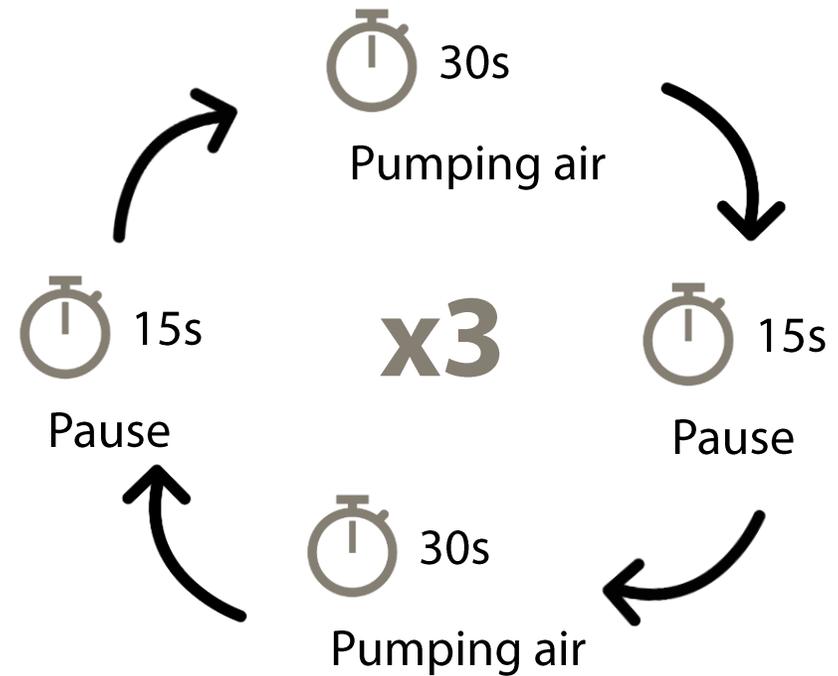


Getting Started

1. Turn on the goggle by pressing on the power button **P** once until a blue light indicator is on.

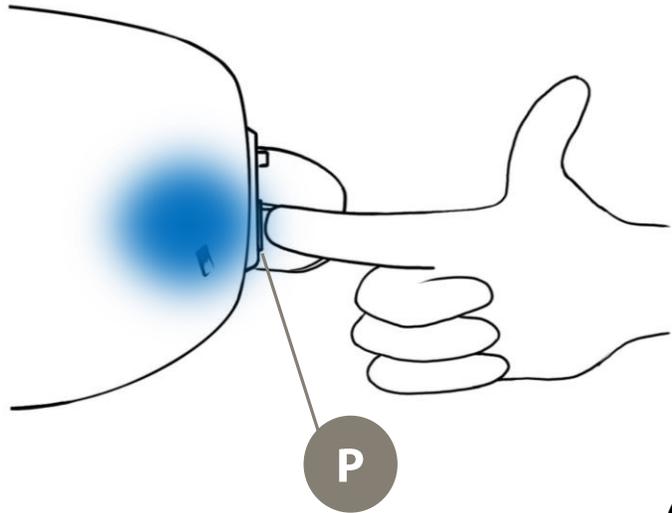


2. Start the relaxation mode by pressing on the white button **M**. The goggle will illuminate a red light in the middle

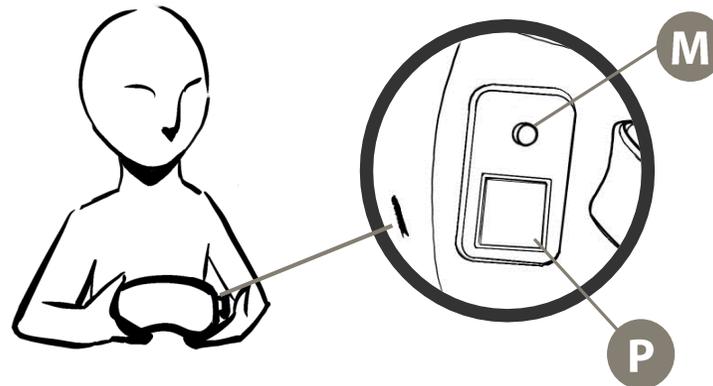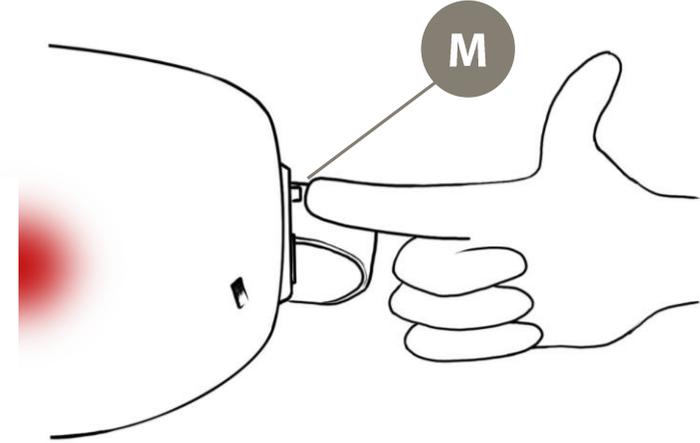


Getting Started

3. Open the straps by pressing and pulling the lock out

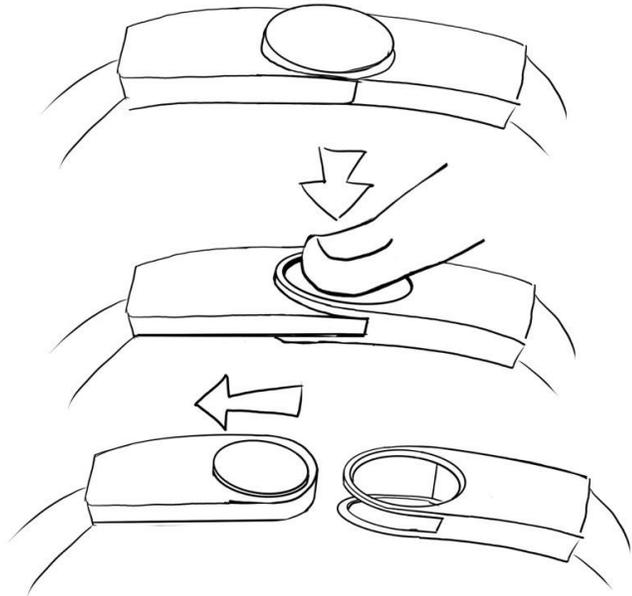

4. Place the device on clean, dry skin and over the eyes. Ensure that eyeglasses and contact lenses are removed before use.

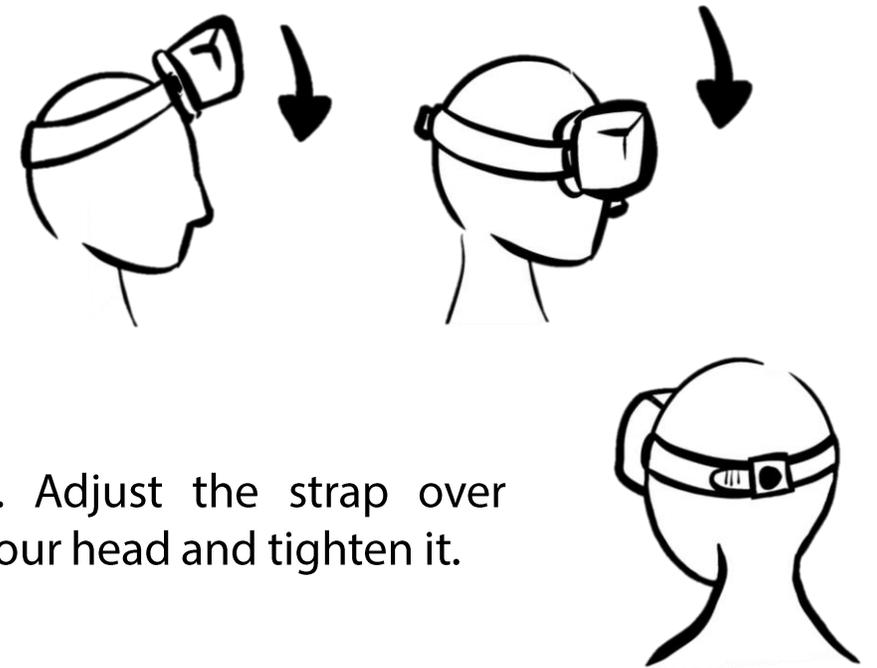

5. Adjust the strap over your head and tighten it.


Getting Started

6. Enjoy the therapeutic effects on the eyes.




1

1 min – Pre-heating

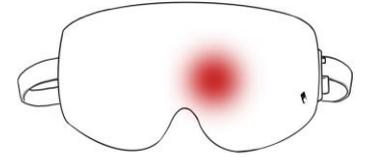


2

2-3 mins – Thermal Stretching x3

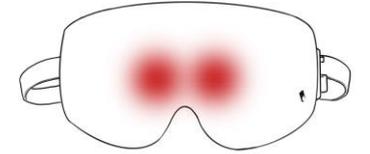


3

10 mins – Continuous heating

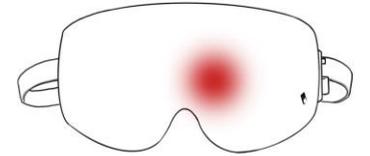


4

2-3 mins – Thermal Stretching x3

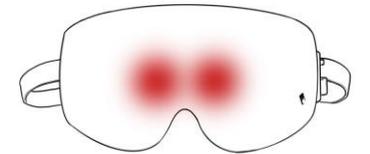




5

Treatment completed

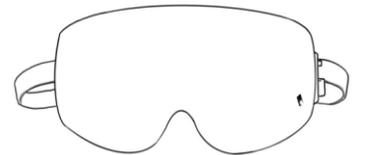


Getting Started

7. Once you are done with your eye therapy session, turn off the device by pressing the relaxation mode button **M** once followed by the power button **P** twice.

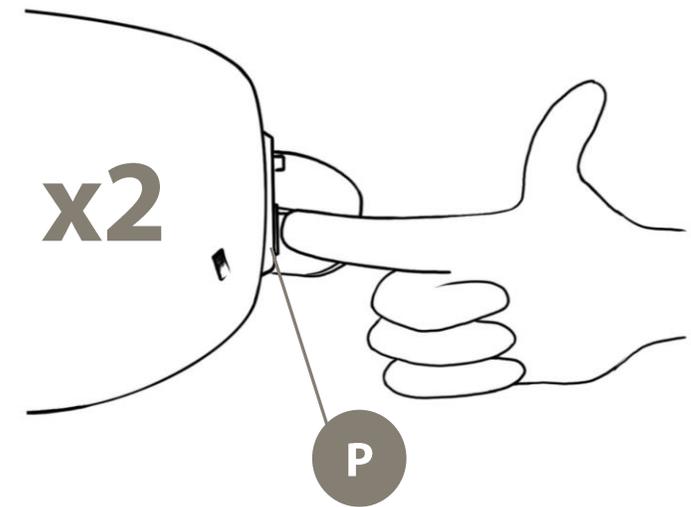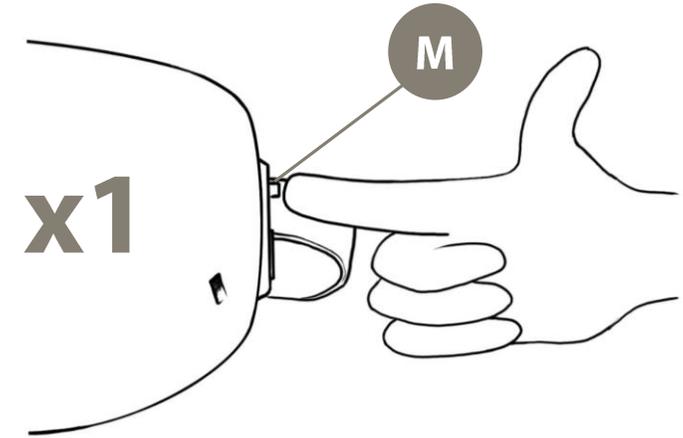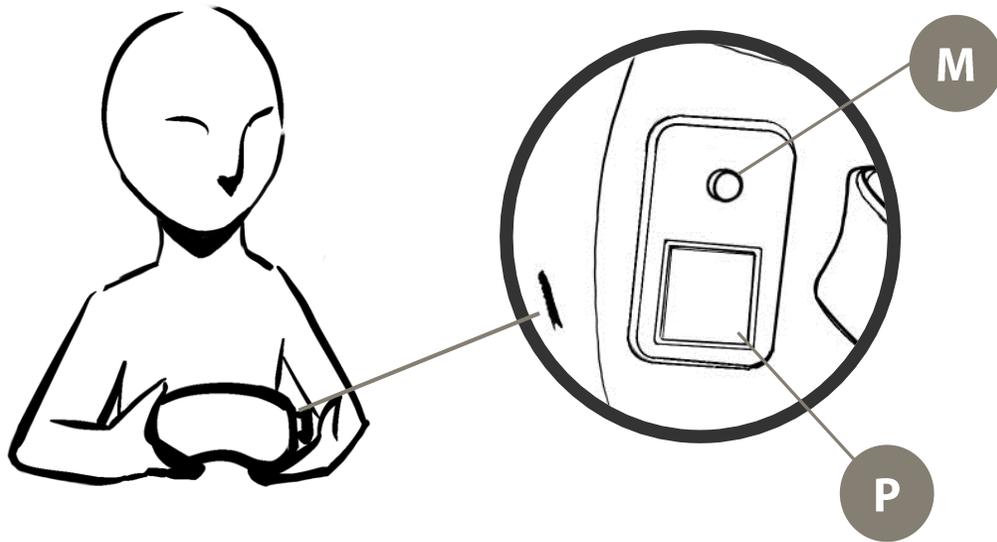

Charging

- O-Oley is USB-C enabled
- The USB port is located at the bottom side of the device near the power button
- Insert the USB-C cable into the port to charge O-Oley
- A blue blinking light indicates the device is being charged
- The device is fully charged when the blue light is no longer blinking
- The device will take 30 minutes to be fully charged
- Charge the device after every session

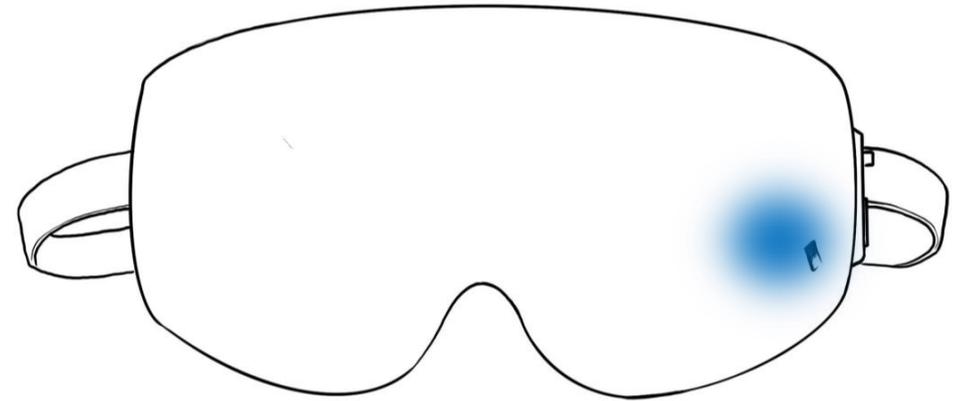

Precautions


Warning

- O-Oley goggle is not waterproof and not water-resistant
- Do not open the case/shell of the device

Cleaning the goggle

- Wipe with clean soft dry cloth
- Use a diluted neutral detergent to clean

Qley

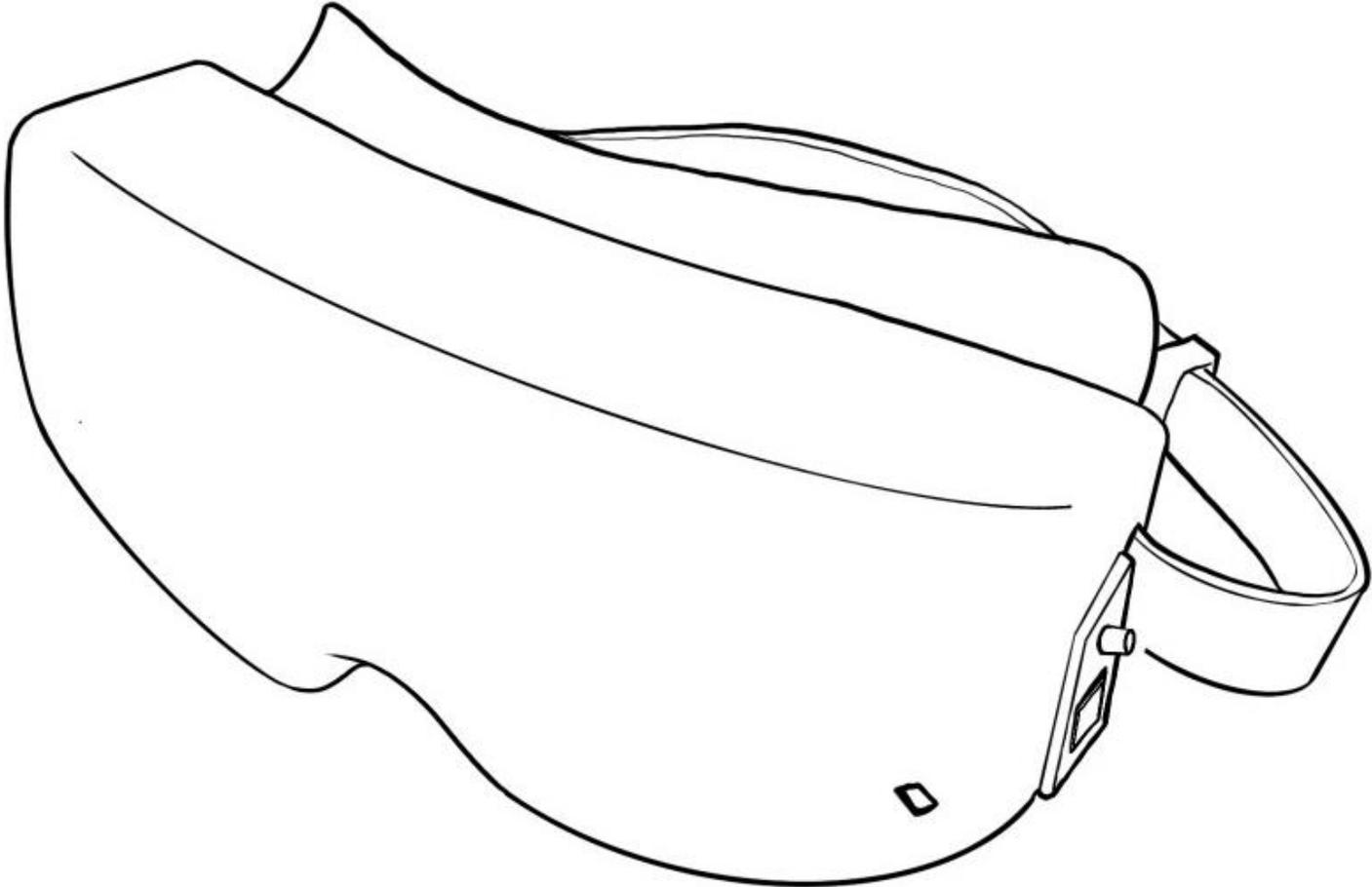


產品概覽

O-Oley 由香港詹姆斯戴森獎全國獲獎者研發，是一種可預防青光眼的生物醫學護脈罩。O-Oley 使用個人化的眼部熱瑜珈伸展運動，旨在透過降低眼睛壓力和提高眼部組織柔軟度來保持眼睛健康。享受放鬆、緩解眼睛疲勞和改善睡眠品質的治療效果，同時確保眼睛健康的長期效果。


包裝內容物品清單

- A O-Oley眼罩
- B USB-C充電線
- C 使用手冊

A

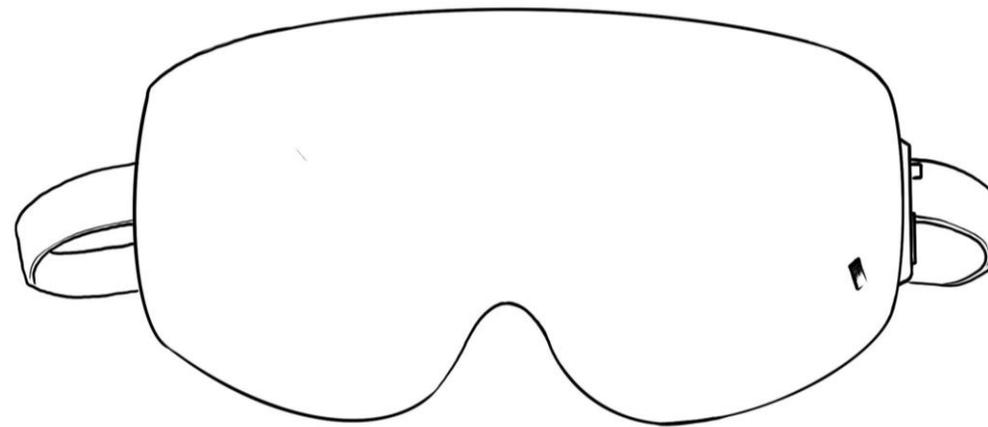

B

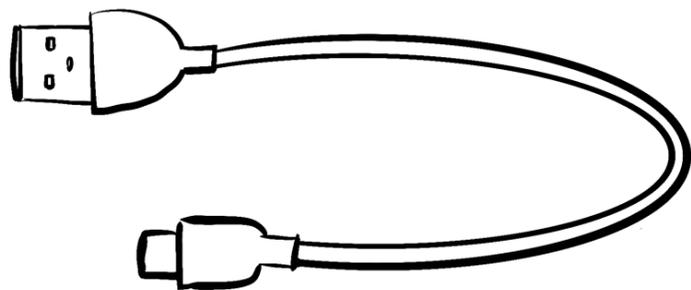

C



使用者介面

P

電源按鈕


按下電源按鈕一次，直到出現藍色指示燈以開啟電源。

M

放鬆模式按鈕

按一次放鬆模式按鈕以開啟或關閉治療效果。


關機時，請按一次放鬆模式按鈕，然後按兩次電源按鈕。

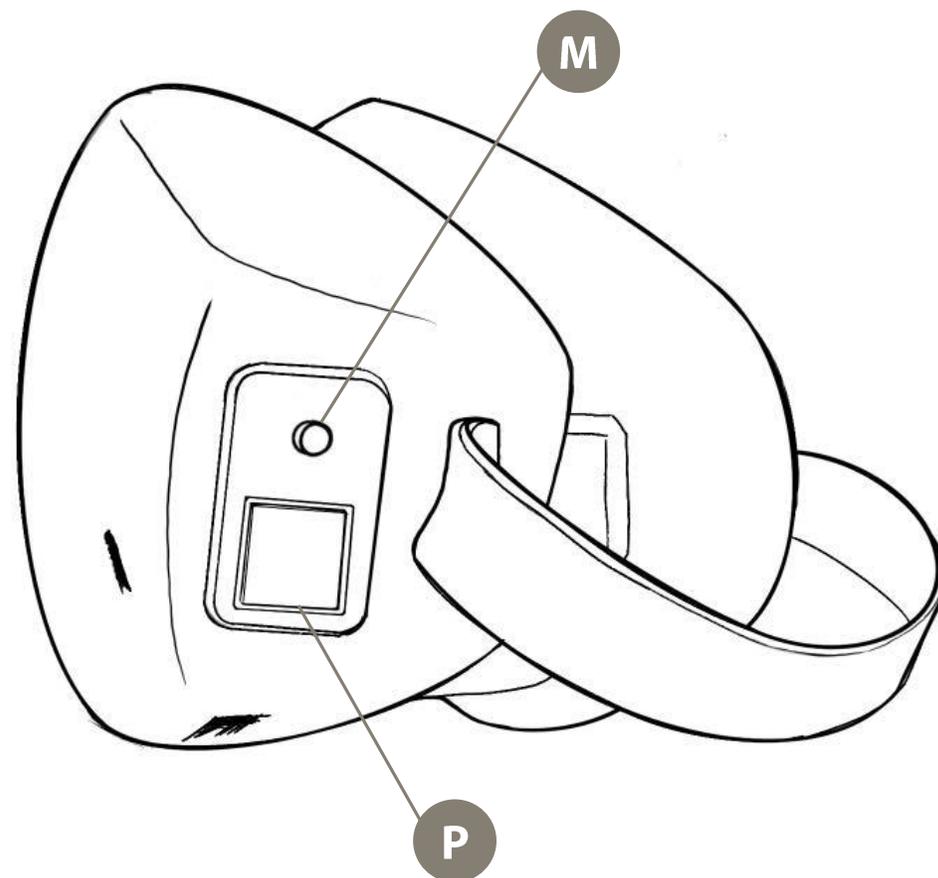


使用者介面

紅色指示燈

在開啟放鬆模式後，紅色指示燈將亮起，表示眼罩正在充電，即將啟動治療療程。

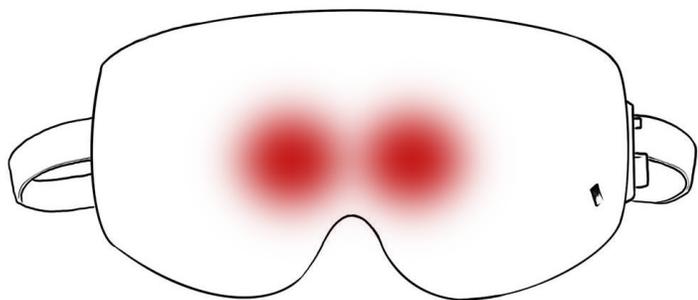


循環療法


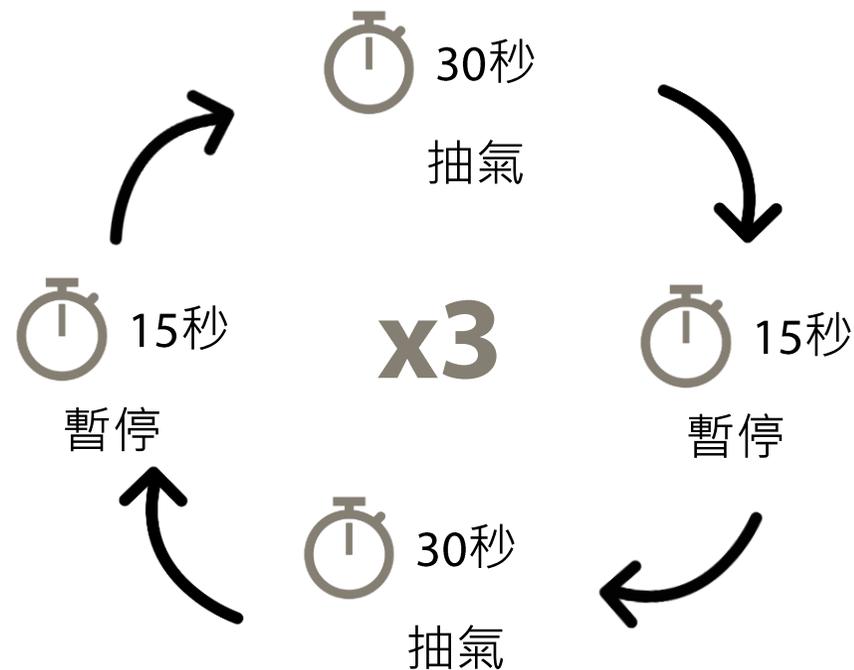


開始使用

1. 通過按一次電源按鈕 **P**，將眼罩開啟，直到出現藍色指示燈。

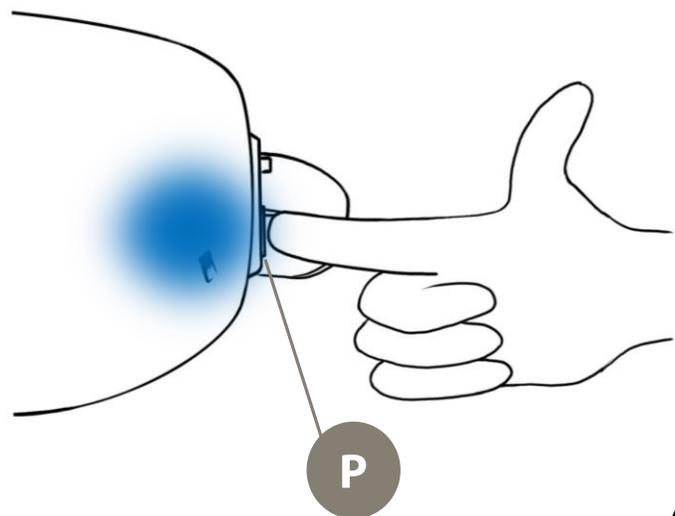


2. 通過按下白色按鈕 **M** 開啟放鬆模式。眼罩中間會亮起紅色指示燈。

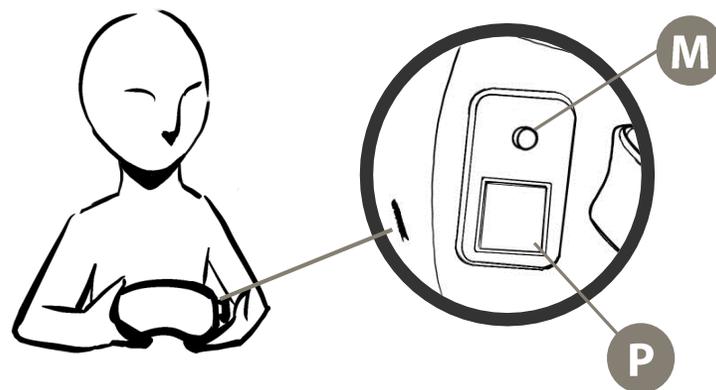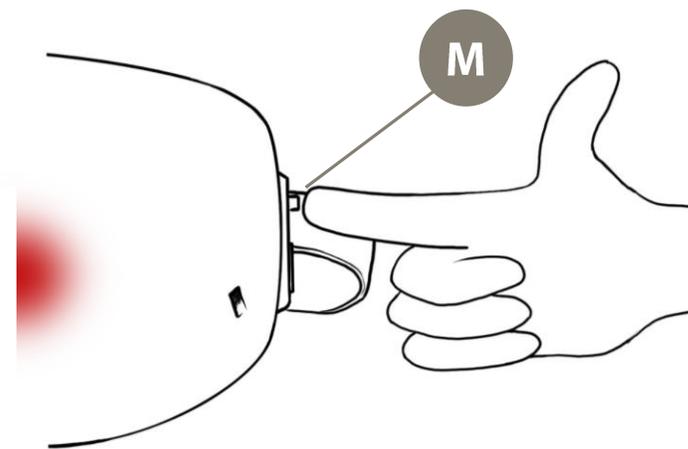


開始使用

3. 通過按下並拉出鎖定裝置，打開繫帶。

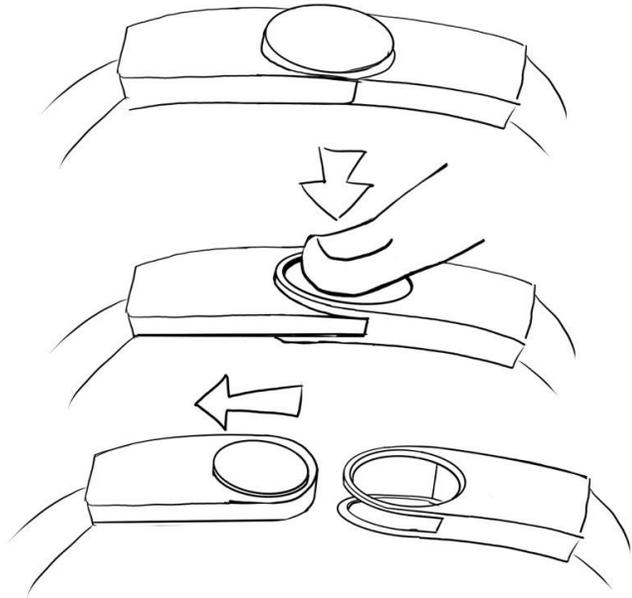

4. 將裝置放在乾淨、乾燥的皮膚上，並覆蓋在眼睛上。使用前請確保已取下眼鏡和隱形眼鏡。

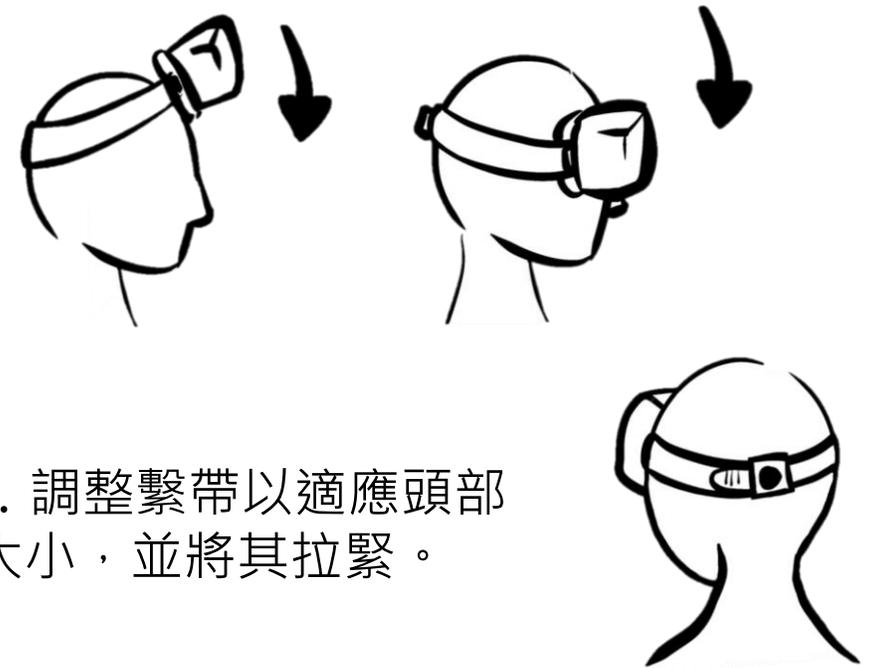

5. 調整繫帶以適應頭部大小，並將其拉緊。


開始使用

6. 享受眼部的治療效果。




1

1分鐘 - 預熱

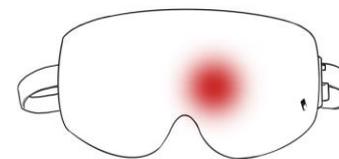


2

2-3分鐘 - 熱能伸展
x3

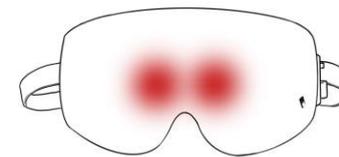


3

10分鐘 - 持續加熱

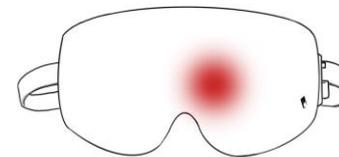


4

2-3分鐘 - 熱能伸展
x3

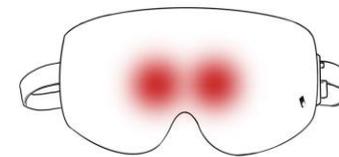




5

療程完成

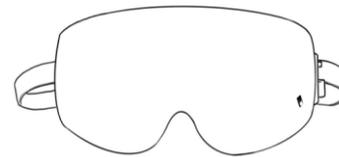


開始使用

7. 眼部治療結束後，按一次放鬆模式按鈕 **M**，然後按兩次電源按鈕 **P** 關閉設備。

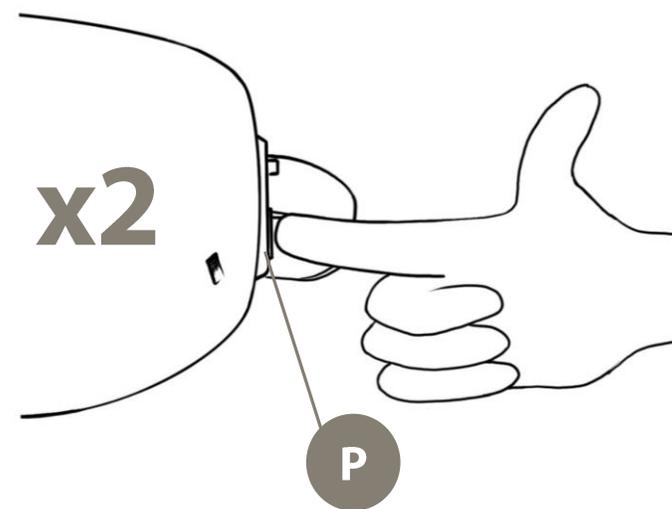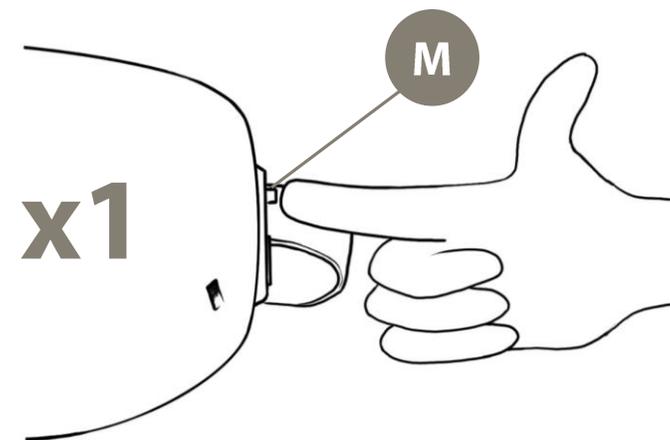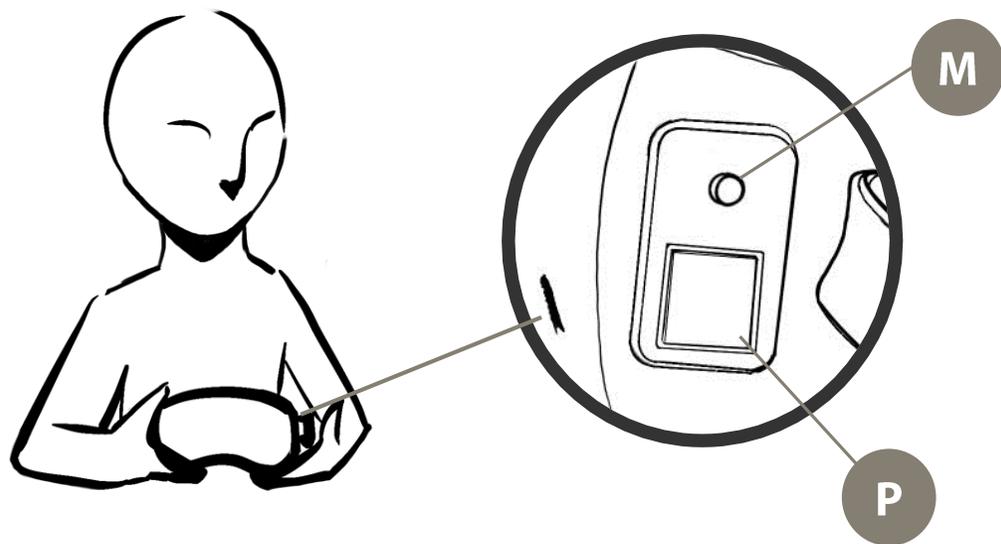

充電步驟

- O-Oley支援USB-C充電
- USB接口位於設備底部靠近電源按鈕的位置
- 將USB-C充電線插入接口以對O-Oley進行充電
- 藍色閃爍的指示燈表示設備正在充電中
- 當藍色指示燈不再閃爍時，表示設備已經充滿電
- 設備需要30分鐘才能完全充電
- 每次使用後都請將設備充電

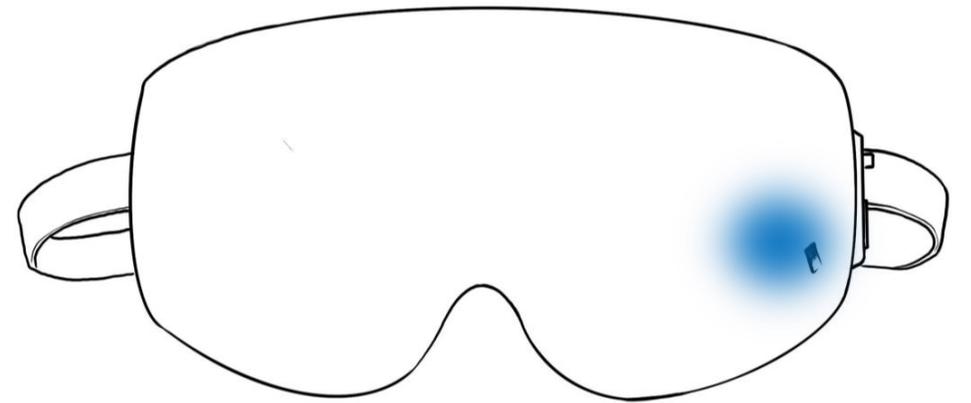

注意事項

警告

- O-Oley眼罩不防水，也不具備防水功能
- 請勿打開設備的外殼

清洗護目鏡

- 使用乾淨柔軟的乾布擦拭
- 使用稀釋的中性洗劑進行清潔

Qley